


# HALITA<sup>®</sup> Limpiador Lingual

Elimina la película de bacterias productoras de gases malolientes que se forma sobre la superficie de la lengua. Sus dos caras, una de perfil ondulado, especial para adaptarse a la depresión central de la lengua, y otra de perfil liso, para limpiar los laterales, permiten efectuar fácilmente la limpieza de la lengua.

## ¿CÓMO SE USA?

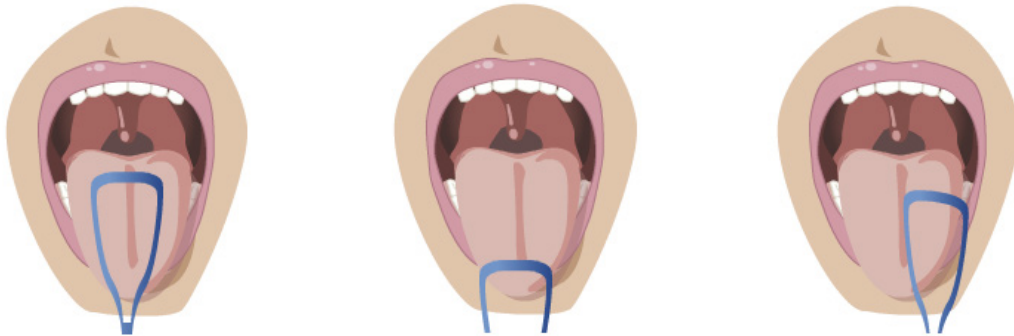

- 1. Limpia primero la parte central de la lengua**, utilizando la cara del limpiador que presenta un saliente. Para ello, sujeta el limpiador lingual por el mango de modo que el saliente quede en la parte inferior. **Saca la lengua e introduce el limpiador lingual en la boca** intentando alcanzar la parte más lejana de la lengua.
- 2. Arrastra el limpiador por el centro de la lengua** hacia la parte delantera de la boca. **Aclara el limpiador** con agua.
- 3. Limpia los laterales de la lengua** utilizando la cara lisa del limpiador. **Aclara el limpiador** después de cada pasada.



CN 313585.6